



Kdekoľvek. Kedykoľvek.



Analýzátor telesného zloženia Charder U310 ponúka systém merania celého tela v prenosnom zariadení, čím zvyšuje dostupnosť a pohodlie! Výsledky sa synchronizujú s aplikáciou Charder ProScan pre ľubovoľný počet používateľov, čo uľahčuje správu výsledkov!



Rýchle skenovanie



Segmentová analýza



Neobmedzený počet používateľov



Testovanie kdekoľvek

Intuitívne a užívateľsky prívetivé rozhranie

Automatické spárovanie zariadenia

Vytvorenie nových používateľských účtov je pomocou aplikácie Charder ProScan rýchle a jednoduché! Po výbere používateľa stlačte tlačidlo merania, aby sa profil používateľa preniesol do zariadenia a došlo k automatickému spárovaniu a meraniu!

Skenovanie celého tela trvá približne 30 sekúnd, pričom priebeh je jasne zobrazený na LCD displeji. Výsledky sa po dokončení automaticky uložia do aplikácie, kde sú rozdelené do niekoľkých prehľadných modulov pre pohodlné spravovanie a sledovanie výsledkov!



Kľúčové výsledky zloženia tela



Zloženie tela

Získajte výsledky týkajúce sa obsahu vody v tele, kostnej hmoty a ďalších parametrov!



Svaly

celé telo

Segmentálne

Získajte merania svalov celého tela a jednotlivých segmentov, vďaka čomu môžete odhaliť nerovnováhu a prispôsobiť tréning podľa toho!



Obezita

celé telo

Segmentálne

Vyhodnoťte telesný tuk pomocou viacerých kľúčových ukazovateľov! Okrem celkového telesného tuku získate aj výsledky pre všetky štyri končatiny a trup, ako aj pre viscerálny tuk v brušnej oblasti.



Analýza typu postavy

Získajte posúdenie pomeru telesného tuku a svalovej hmoty spolu s vyhodnotením a odporúčaniami na základe výsledkov.



Sledovanie histórie

Uložte si a prezeraťte toľko výsledkov, koľko potrebujete, s rýchlym porovnaním s predchádzajúcimi výsledkami, čo uľahčuje sledovanie zmien a pokroku.

Vysúvateľný kábel uľahčuje používanie zariadenia deťom aj dospelým!




Charder Proscan




Vychutnajte si nový inteligentný spôsob merania telesného zloženia a sledovania pokroku!

Aplikácia Charder ProScan je k dispozícii pre zariadenia s operačným systémom iOS a Android a je navrhnutá tak, aby poskytovala trénerom potrebné informácie na pochopenie pokroku klientov a pomáhala im na ich ceste k zdraviu.

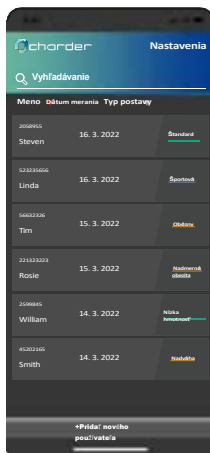


Neobmedzený počet používateľov

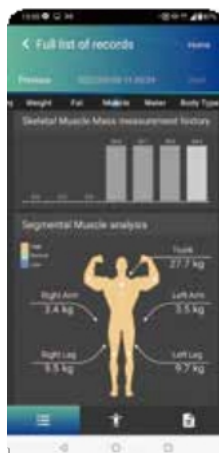

Výsledky podľa segmentov



Analýza tela

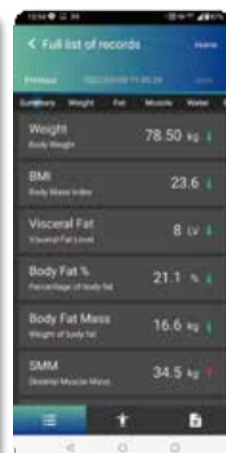

Prehľad výsledkov



Zlepšiť retenciu

Vytvorte tréningové programy založené na údajoch o zložení tela každého klienta! Kvantifikujte pokrok a získajte informácie založené na údajoch, ktoré preukážu účinnosť vašich osobných tréningových programov!



Automatické zaznamenávanie výsledkov

Rozlúčte sa s perom a papierom a chybami pri prepisovaní, pretože výsledky sa automaticky a bez námahy prenášajú do aplikácie Charder ProScan, kde môžete ľahko sledovať trendy! Výsledky môžete poslať klientom jedným kliknutím!



Zdieľanie výsledkov

Jednoduché zasielanie výsledkov meraní klientom, vďaka čomu môžu sledovať pokrok, ktorý dosiahli v rámci vášho programu.



Ľahký a prenosný

Model U310 je navrhnutý tak, aby bol ľahký a prenosný, čo je ideálne pre osobných trénerov, ktorí sú neustále v pohybe! Vďaka hmotnosti iba 2,2 kg môžu tréneri poskytovať klientom profesionálne merania za menej ako 25 sekúnd.



* Taška na prenášanie je voliteľným príslušenstvom.

Analýzátor telesného zloženia U310

Kľúčové špecifikácie

Analýza bioelektrickej impedancie (BIA)	10 meraní impedancie: 2 frekvencie (5 kHz, 50 kHz) pre 5 segmentov (pravá ruka, ľavá ruka, trup, pravá noha, ľavá noha)
Elektrody	8-bodový dizajn hmatových elektród
Displej	85 (Š) x 80 (V): mm 3,3 (Š) x 3,1 (V) palca
Kapacita / Rozlíšenie	0–200 kg (±1 %)
Rozlíšenie	0–100 kg x 0,05 kg 100–200 kg x 0,1 kg
Vhodný vek	6–85 rokov
Výstup / prenos	Bezdrôtové (BT)
Doba merania	Menej ako 30 sekúnd
Rozmery zariadenia (približné)	385 (dĺžka) x 350 (šírka) x 50,5 (výška): mm 15,2 (dĺžka) x 13,8 (šírka) x 2,0 (výška): palce
Hmotnosť zariadenia	Približne 2,2 kg (4,9 lb)
Zdroj napájania	Adaptér alebo AA batérie*4
Príslušenstvo	Taška na prenášanie (voliteľná)

Výstup výsledkov

Analýza zloženia tela	Celkový obsah vody v tele, kostná hmota, hmotnosť
Analýza svalovej hmoty	Mäkká beztuková hmota, kostrová svalová hmota
Analýza obezity	Tuková hmota, percentuálny podiel telesného tuku, index telesnej hmotnosti, úroveň viscerálneho tuku
Segmentová analýza	Segmentálna beztuková hmotnosť, segmentálny telesný tuk
Analýza telesného typu	Základný metabolizmus, typ postavy, telesný vek, analýza typu postavy
Jednotka	Imperial, metrický



Charder Electronic Co., Ltd.
No.103, Guozhong Rd., Dali Dist., Taichung City 41262 Taiwan
KALIBRA SK s.r.o.
Kukučínová 2968, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Tel. +421 903 251 293
vahyknapec@gmail.com
kalibraeshop@gmail.com